



Om du behöver hjälp med att använda denna produkt, vänligen kontakta lokal kundtjänst: info@halsoteknologi.se | tel. 08 5250 7055

1. LADDNING

När enheten är påslagen tänds en färgad LED-indikator på strömbrytaren. En grön lampa indikerar att din enhet har tillräckligt med batterikraft. När en röd lampa tänds på knappen betyder det att enheten behöver laddas och att enheten automatiskt stängs av efter en (1) minut. Under laddning visar strömknappen ett blått ljus som släcks när enheten är fulladdad.

Använd en 5V 1.5A USB-strömadapter eller högre för korrekt och effektiv drift. Ladda enheten när full effekt är uttömd för att bibehålla optimal batteriprestanda.

2. FÖRVARING

Apparatens förpackningen är designad för att användas som förvaring för enheten när den inte används efter hantering och rengöring. Se till att kamhuvudet är i förvaringsläge (mellan rak och rakning – se del 4) genom att dra ner den blåa knappen och justera vinkeln tills kamtänderna snäpper på plats. Säkra enheten genom att låsa sidosatserna inuti förpackningen till de ihåliga delarna på sidan av enheten.




Bytbara uppsamlingsfiltret levereras i återförslutningsbara omslag med tre (3) enheter vardera. Riv upp omslaget, ta ett (1) filter och stäng förpackningen igen.

Rotera för att låsa upp din V-Comb A1 genom att rikta in kontrollpilarna med upplåsningsymbolen. Placera uppsamlingsfiltret (med rund öppning uppåt) i det genomskinliga facket på enhetens kropp.


Sätt försiktigt tillbaka kamhuvudet på kroppen av apparaten genom att rikta in styrpilarna med låssymbolen.

4. HÅRKAMNINGSVINKLAR

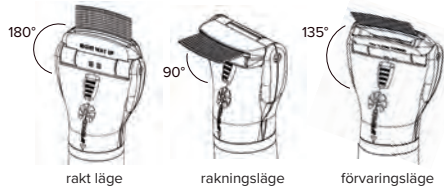

För att ändra kamningsvinkeln, dra och håll ned den blåa knappen ovanför V-Comb A1-logotypen och justera vinkeln på borstarna. Slåp vredet för att säkra det på plats. Det finns två kamningspositioner (rak eller rakning) och en position endast för förvaring.

6. HYGIENISK AVFALLSHANTERING

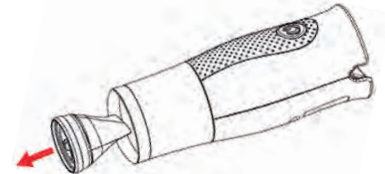

Bortskaffa uppsamlingsfiltret hygieniskt genom att ta bort kamhuvudet från huvuddelen genom att vrida för att rikta in kontrollpilarna mot upplåsningsikonen. Luta sedan försiktigt huvuddelen över papperskorgen tills det stängda uppsamlingsfiltret faller bort automatiskt.



4-STEGS VÅRDGUIDE

Steg 1: IDENTIFIERING

Använd löss-sugaren för att kontrollera om det finns några tecken på huvudlöss, nymfer, ägg eller röda sår i håret.

Identifiera löss med löss-sugaren

Steg 2: BORTTAGNING

Använd löss-sugaren för att bli av med vuxna huvudlöss, nymfer och levande ägg.

Använd löss-sugaren dagligen för 1–3 dagar

Steg 3: BRYT CIRKELN

Kamma bort eventuellt kvarlämnade ägg, nyligen kläckta nymfer eller nya huvudlöss.

Kamma även på 7. dagen

Steg 4: FÖREBYGGANDE

Kontrollera om det finns nya löss som kan ha överförts från andra människor.


Kontrollera veckovis



©2021 ToLife Technologies Pty Ltd
V-Comb® A1 är en patenterad och registrerad produkt genom design.
V-Comb® är ett registrerat varumärke.

www.loss-sugare.se

LÖSSENS LIVSCYKL

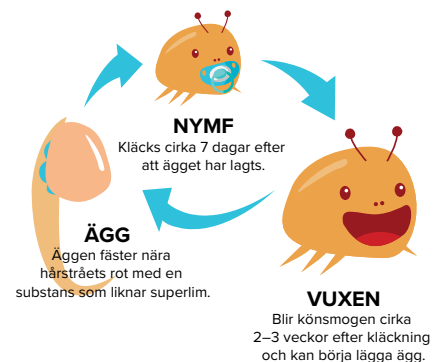

Huvudlöss lever i ungefär 30 dagar, och en enda honnlöss kan lägga upp till 150 ägg under sin livstid.

Äggen kläcks på 7–10 dagar, vilket gör det viktigt att använda löss-sugaren dagligen under flera dagar under en aktiv infektion.

Att bryta livscykeln är avgörande för att säkerställa att alla ägg, löss eller nya löss som kan ha överförts elimineras innan de hinner bli könsmogna.

Hälsoteknologi

info@halsoteknologi.se | tel. 08 5250 7055